



Extracción de

HEMODERIVADOS

a través de **PICC-Port**

¿Qué material necesitamos?

- Mascarillas
- Guantes estériles
- Paño estéril
- Gasas estériles
- Aguja de carga
- Solución salina al 0,9%
- Jeringas de 10ml y 20 ml
- Clorhexidina alcohólica al 2%
- Aguja tipo Huber de 20G y 15-17mm*
- Apósito trasparente semipermeable
- Apósito pequeño de gasa
- Bioconector o tapón antirreflujo
- Tapón protector con desinfectante

PROCEDIMIENTO



1 Utilizar aguja tipo Huber PPS de 20G y 15-17mm* según la profundidad donde se encuentre el PICC-Port




2 Limpiar y desinfectar la zona de punción y zonas colindantes con clorhexidina alcohólica al 2%




3 Realizar el procedimiento de punción y manipulación con Técnica Aséptica No Tocar (ANTT)



4 Desinfectar el conector o bioconector de la aguja tipo Huber con clorhexidina alcohólica al 2% durante al menos 15 seg, conectar la o jeringa al conector o bioconector, aspirar entre 2-3ml de sangre y desechar

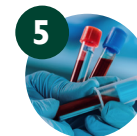

5 Extraer los tubos específicos necesarios para la muestra analítica solicitada

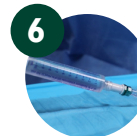

6 Finalizada la extracción sanguínea salinizar el PICC-port con al menos 20ml de solución salina al 0,9% usar jeringa de 10ml-20ml accionada manualmente, realizar técnica push-stop, y pinzar con técnica de presión positiva dejando 1ml en la jeringa



7 Asegurarse siempre que el PICC-port no va a movilizarse cuando sea retirada la aguja tipo Huber según las indicaciones



8 Limpiar y desinfectar con clorhexidina alcohólica al 2% el punto de punción y cubrir al menos 12h con apósito de gasa