

ACCESO VASCULAR

CATÉTER VENOSO
CENTRAL DE INSERCIÓN
PERIFÉRICA

CT PICC Easy

Corte proximal para
colocación simplificada y
precisa



CT PICC easy

CT PICC easy es un PICC único de poliuretano con **corte proximal**.


- **Facilitar y precisar** su inserción mediante técnica convencional o ECG (no es necesario cortar el catéter antes de la inserción).
- Preservación de la integridad de la punta distal cónica: **menos traumática para la vena** y minimización del riesgo de trombosis.

CT PICC easy es compatible con alto flujohasta **6 ml/s and 325 psi** (22,4bars)


Parámetros	Angiografía	CT	IRM
Caudales	0-40 ml/s	0,1-7 ml/s	0,1-7 ml/s
Límite presión inyector	1200 psi	325 psi	325 psi

Fuente : ECRI Report 2009 : Injectors, Contrast Media, Angiography, CT

Conexión desechable
Permite cortar el catéter tras su inserción

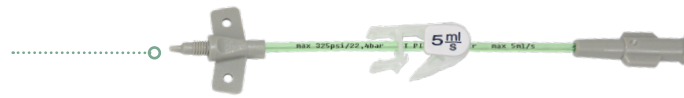

Marcado
Marcado centimetrado claro

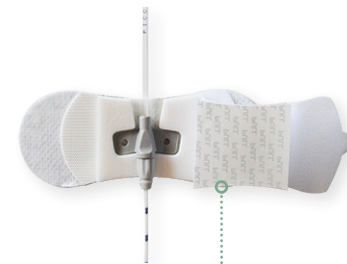

Fijación griplok
Diseñado específicamente para una sujeción estable y segura

325 psi
Hasta 6 ml/s

Punta distal cónica
Menos traumático para la vena al reducir el riesgo de trombosis

Caudal máximo de hasta 6 ml/s:

- hace posible el examen por TAC de un mayor número de órganos⁽¹⁾
- permite una mejor calidad de imagen y visualización de los tejidos

Cumplen la nueva generación de especificaciones de inyector de 325 psi²

- Más seguro para el paciente
- Más seguridad para el técnico radiólogo

1 -ECRI Report 2009 : Injectors, Contrast Media, Angiography, CT
2- Medrad Spectris, Stellant D et Sx, Guerbet Optivantage DH


Posicionamiento del catéter con ECG

Esta técnica utiliza las variaciones de la amplitud de la onda P cuando el catéter, que actúa como electrodo intravascular, se acerca a la aurícula derecha.

- Permite controlar y ajustar la posición de la punta del catéter en tiempo real con gran precisión (1)
- Elimina el uso de fluoroscopia durante la colocación (2)
- Evita el reposicionamiento del catéter central ((3))
- Posibilidad de controlar la posición del catéter en cualquier momento tras la inserción (3)

vygocard

El dispositivo de ECG intracavitario proporciona una localización precisa de la punta utilizando una máquina de ECG estándar

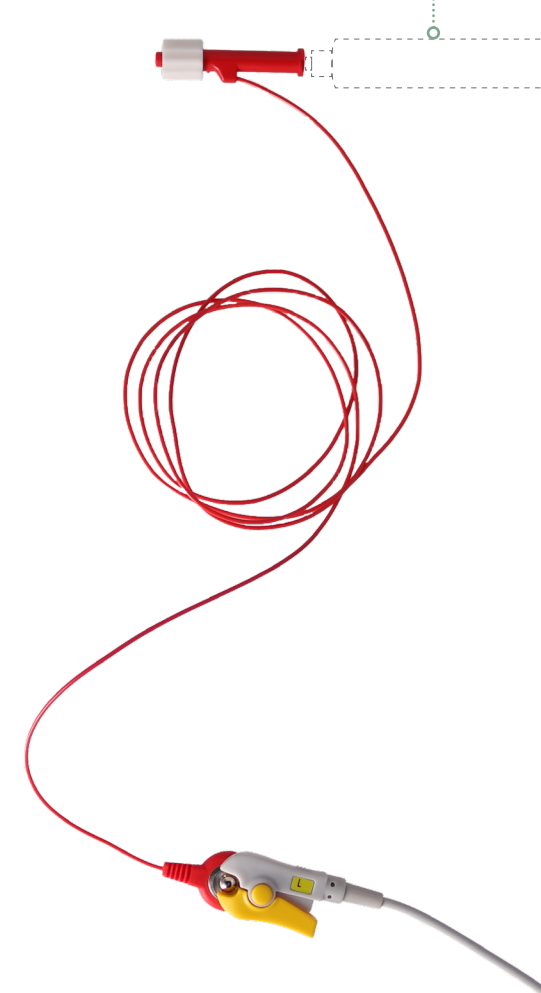

Dilatador pelable
Dilatador flexible y firme para una inserción suave a través de la piel

Aguja de seguridad de 21G
Punta ecogénica superior



Set completo de colocación estándar o personalizado

Colocación de PICC por ultrasonidos

El riesgo de infección del torrente sanguíneo en adultos con diferentes dispositivos intravasculares: una revisión sistemática de 200 estudios prospectivos publicados. Maki G. et al., Mayo Clin Proc, 2006. The use of ultrasound to improve practice and reduce complication rates in peripherally inserted central catheter insertions: final report of investigation. Stokowski G. et al. Journal of Infus Nurs., 2009. Ultrasound guidance for placement of central venous catheters: a meta-analysis of the literature (Guía ecográfica para la colocación de catéteres venosos centrales: metaanálisis de la bibliografía). Randolph AG et al. Crit Care Med., 1996.


Técnica ECG

(1) El método de ECG intracavitario para el posicionamiento de la punta de los catéteres venosos centrales: resultados de un estudio multicéntrico italiano. Pittiruti M. et al. The journal of vascular access. 2012 Feb. 8.
(2) Directrices ESPEN sobre nutrición parenteral: Catéteres venosos centrales. Nutrición clínica. 2009.
(3) Colocación y posición de la punta del catéter central de inserción periférica guiada por electrocardiograma (EKG): Resultados de un ensayo para sustituir la confirmación radiológica. Nancy L. Moureau et al. JAVA15-1-3 2010.

CT PICC easy

Sets de PICC con accesorios para la colocación de la técnica Microseldinger.

		Catéter				
Códigos de los productos	Longitud de la guía (cm)	Ø	Externa Ø (mm)	Interna Ø (mm)	Máximo caudal de inyección de potencia indicado	Presión máxima
V021292213	50	3Fr	1,0	0,6	1 ml/s	325 psi (22,4 bar)
V021292413	67					
V021292214	50	4Fr	1,35	0,9	5 ml/s	325 psi (22,4 bar)
V021292414	67					
V021292514	135					
V021292215	50	5Fr	1,67	1,1	6 ml/s	325 psi (22,4 bar)
V021292415	67					
V021292515	135					

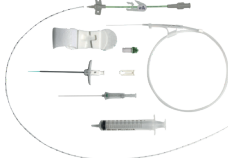

Kit Microseldinger:

- 1 catéter totalmente radiopaco (60 cm de longitud) de poliuretano bioestable con aletas temporales
- 1 estilete metálico para hacer el catéter más rígido y facilitar así la inserción
- 1 conector proximal en "T". El puerto lateral del conector en "T" puede utilizarse para inyectar solución salina
- 1 alargadera desmontable con pinza Robert
- 1 aguja introductora de seguridad 21G x 7cm
- 1 guía recta de Nitinol de 50, 67 o 135 cm, 0,018".
- 1 guía recta de Nitinol de 50, 67 o 135 cm, 0,018".

- 1 jeringa Luer Slip 10 ml
- 1 pinza deslizante
- 1 cinta métrica
- 1 dispositivo de fijación griplok
- 1 Bionector
- 1 bisturí de seguridad

Dispositivo de derivación de ECG intracavitario

Se utiliza con una máquina de ECG (p. ej. PILOT TLS) para la comprobación no radiográfica de la posición de los catéteres venosos centrales

Nombre	Tipo	Conexión	Product code	
Vygocard	Con columna de suero salino	Luer-lock	9164.002	

PARA MÁS INFORMACIÓN, DIRÍJASE A: comunicacion@vygon.com

Las especificaciones que figuran en este folleto son meramente informativas y no tienen, en ningún caso, carácter contractual.

VYCON. Polígono industrial Fuente del Jarro, C/ Ciutat de Sevilla, 34, 46980, Paterna (Valencia)

+34 961 34 30 30

www.vygon.com 