




TÉCNICA MICROSELDINGER: SET MICROSELDINGER

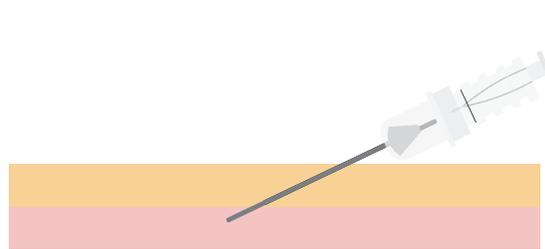


1 Punción con la aguja

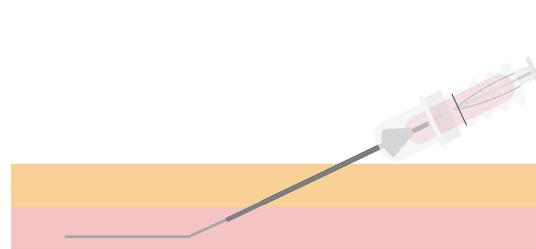


2 Inserción de la guía metálica a través de la cánula de la aguja

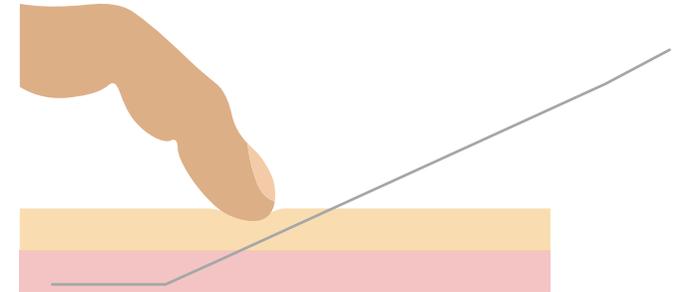


3 Retirar la aguja manteniendo la guía dentro del vaso

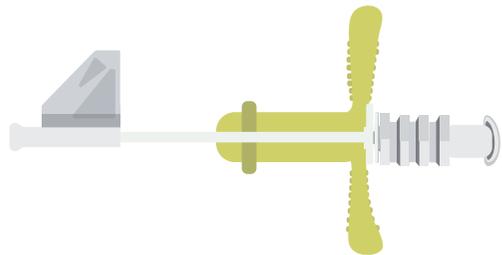


4 Colocación del dispositivo de ayuda para la inserción en la guía

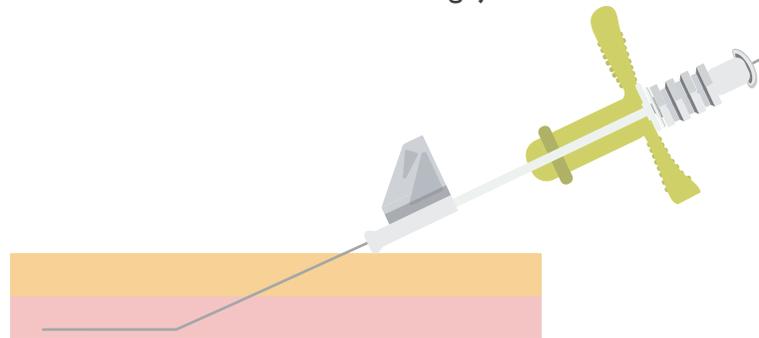


5 Avanzar el dilatador con el dispositivo de ayuda a través de la guía

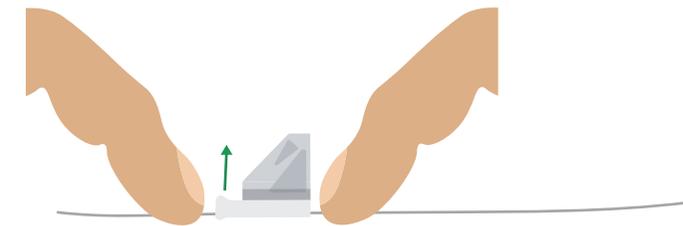


6 Retirar el dispositivo de ayuda y continuar la inserción del dilatador

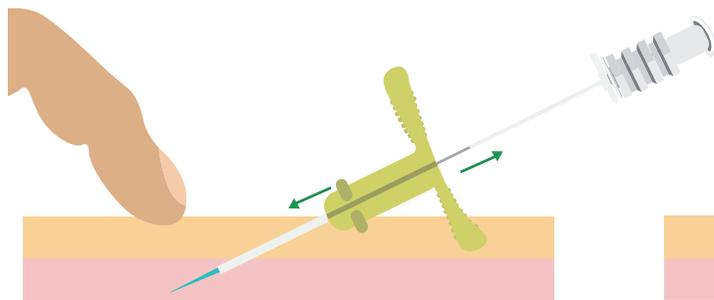

7 Retirar el dilatador junto con la guía de nitinol

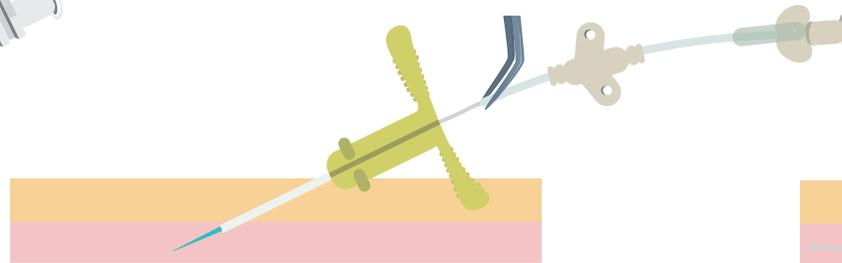

8 Enhebrar el catéter

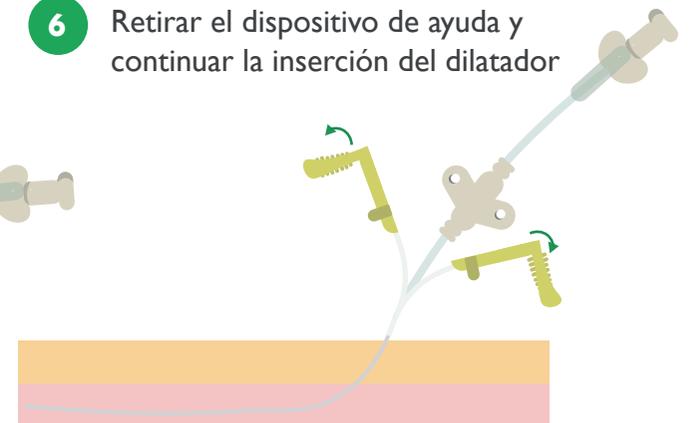

9 Pelar-extraer la cánula pelable y asegurar la correcta colocación del catéter